

8-in-1 urine test

Voordat je begint met het afnemen van deze test: lees de instructies zorgvuldig, zorg ervoor dat de inhoud van deze test verzameld is en dat je je handen gewassen hebt voor het afnemen van de test.

Wanneer er onderdelen van de test ontbreken, neem dan een nieuwe test af om zeker te zijn van het juiste resultaat.




Scan de QR-code voor video instructie



Inhoud van deze kit

- Bufferflesje
- Doorzichtige plastic cup
- Gele plastic cup
- Pipette
- Testcassette
- Kleurschaalreferentietabel
- Foliezakje met cassette

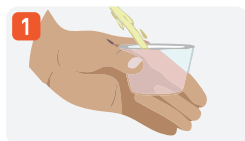

Haal de doorzichtige plastic cup eruit en gebruik deze om uw urine op te vangen.



Pipetteer 5 ml van de opgevangen urine uit de doorzichtige plastic cup.



Voeg 5 ml van de opgevangen urine toe aan de gele plastic cup.




Open het bufferflesje voorzichtig en zorg ervoor dat u niets morst.




Giet de vloeistof van het bufferflesje in de verzamelde gele plastic cup.




Gebruik de druppelaar om de urine en de vloeistof door elkaar te mengen. Doe dit door 10x met de klok mee te draaien.

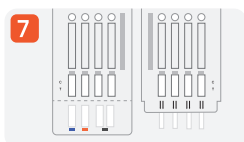


Haal de testcassette uit het foliezakje. Open de onderkant van het cassettedeksel.

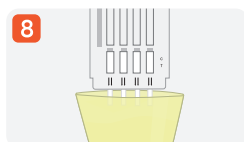


Plaats de cassette in de gele plastic cup en controleer of elke teststrip ondergedompeld is in de vloeistof. Overschrijd de hoogte aangegeven door de pijl niet!

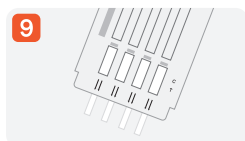


Houd het testapparaat plat op de tafel.

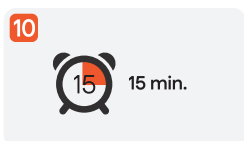


Lees de resultaten na 15 minuten af. Interpreteer de resultaten aan de hand van de referentietabel in de testkit. Tip: stel een timer in op uw telefoon.

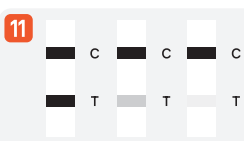

Positief

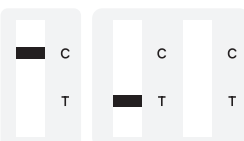

Negatief

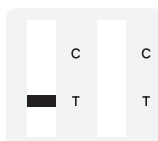

Ongeldig

8-in-1 urine test

Before you begin this test, read the instructions carefully, ensure that all the necessary items for the test are available, and wash your hands before beginning the test.

If any items for the test are missing, take a new test to ensure an accurate result.




Scan QR-code to see video instruction




Contents of this kit


- Sample buffer tube
- Transparent plastic cup
- Yellow plastic cup
- Pipette
- Test cassette
- Color scale reference chart
- Package insert

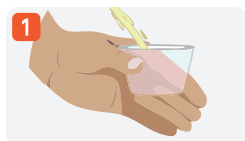

Take out the transparent plastic cup and use it to collect your urine.

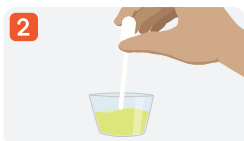

Pipette 5 ml of the collected urine from the urine catcher.

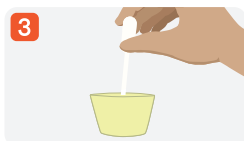

Add the 5 ml of the collected urine into the yellow plastic cup.




Carefully open the buffer tube and make sure not to spill.




Pour the buffer liquid into the yellow plastic cup.




Use the dropper to mix the urine and buffer liquid in a similar clockwise direction for a total of 10 times.

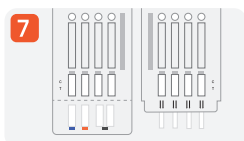


Take out the test cassette from the foil pouch. Open the bottom of the cassette cover.

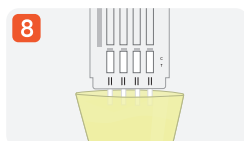


Place the cassette into the yellow plastic cup and observe to make sure that each test strip is immersed in the liquid. Do not exceed the height indicated by the arrow!

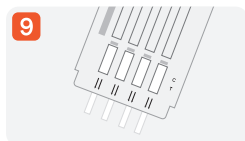

Keep the test device flat on the table.

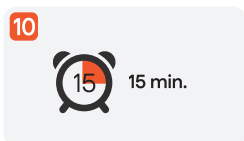

Read the results after 15 minutes. Interpret the results using the reference chart provided in the test kit. Tip: set a timer on your phone.

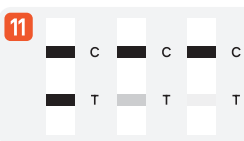

Positive



Negative



Invalid

Test d'urine 8 en 1

Avant de commencer ce test : lisez attentivement les instructions, assurez-vous que le contenu du test est complet et que vous vous êtes lavé les mains avant de commencer.

Si certains éléments du test manquent, refaites le test afin d'obtenir un résultat fiable.



Scannez le code QR pour obtenir des instructions vidéo.




Contenu de ce kit

- Flacon tampon
- Gobelet en plastique transparent
- Gobelet en plastique jaune
- Pipette
- Cassette de test
- Tableau de référence des couleurs
- Sachet en aluminium avec cassette



Retirez le gobelet en plastique transparent et utilisez-le pour recueillir votre urine.

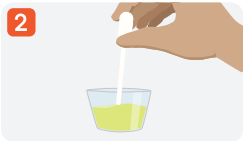

Prélevez 5 ml d'urine recueillie dans le gobelet en plastique transparent à l'aide d'une pipette.



Ajoutez 5 ml d'urine recueillie dans le gobelet en plastique jaune.




Ouvrez délicatement le flacon tampon et veillez à ne rien renverser.




Versez le liquide du flacon tampon dans le gobelet en plastique jaune collecté.




Utilisez le compte-gouttes pour mélanger l'urine et le liquide. Pour ce faire, tournez-le 10 fois dans le sens des aiguilles d'une montre.

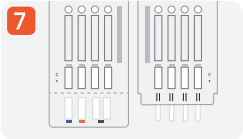

Retirez la cassette de test de son emballage en aluminium. Ouvrez la partie inférieure du couvercle de la cassette.

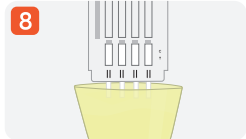


Placez la cassette dans le gobelet en plastique jaune et vérifiez que chaque bandelette réactive est immergée dans le liquide. Ne dépassez pas le niveau indiqué par la flèche !

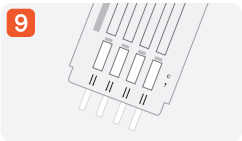


Maintenez l'appareil de test à plat sur la table.



Lisez les résultats après 15 minutes. Interprétez les résultats à l'aide du tableau de référence fourni dans le kit de test. Conseil : réglez le minuteur de votre téléphone.

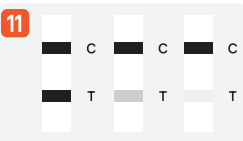

Positif

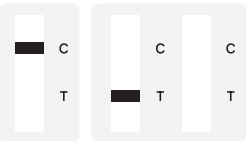

Négatif

Invalide

8-in-1-Urintest

Bevor Sie mit diesem Test beginnen: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, stellen Sie sicher, dass alle für den Test erforderlichen Materialien vorhanden sind, und waschen Sie sich vor Beginn des Tests die Hände.

Sollten Teile des Tests fehlen, führen Sie einen neuen Test durch, um ein korrektes Ergebnis zu gewährleisten.



Scannen Sie den QR-Code für eine Videoanleitung.




Inhalt dieses Sets


- Pufferflasche
- Durchsichtiger Plastikbecher
- Gelber Plastikbecher
- Pipette
- Testkassette
- Farbtabelle
- Folienbeutel mit Kassette



Nehmen Sie den durchsichtigen Plastikbecher heraus und verwenden Sie ihn zum Auffangen Ihres Urins.

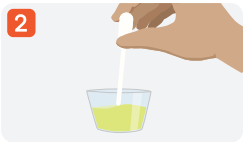

Pipettieren Sie 5 ml des aufgefangenen Urins aus dem durchsichtigen Plastikbecher.

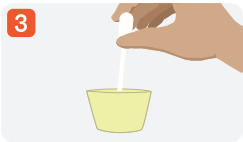

Geben Sie 5 ml des aufgefangenen Urins in den gelben Plastikbecher.




Öffnen Sie die Pufferflasche vorsichtig und achten Sie darauf, nichts zu verschütten.




Gießen Sie die Flüssigkeit aus der Pufferflasche in den gesammelten gelben Plastikbecher.




Verwenden Sie den Tropfer, um den Urin und die Flüssigkeit zu vermischen. Drehen Sie dazu 10 Mal im Uhrzeigersinn.

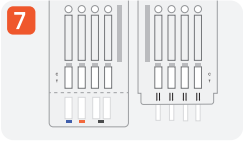

Nehmen Sie die Testkassette aus der Folienverpackung. Öffnen Sie die Unterseite des Kassettendeckels.

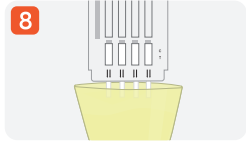


Setzen Sie die Kassette in den gelben Plastikbecher ein und überprüfen Sie, ob jeder Teststreifen vollständig in die Flüssigkeit eingetaucht ist. Überschreiten Sie nicht die durch den Pfeil angegebene Höhe!

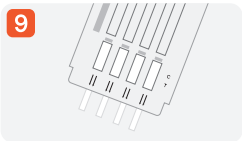


Halten Sie das Testgerät flach auf den Tisch.



Lesen Sie die Ergebnisse nach 15 Minuten ab. Interpretieren Sie die Ergebnisse anhand der Referenztafel im Testkit. Tipp: Stellen Sie einen Timer auf Ihrem Telefon ein.

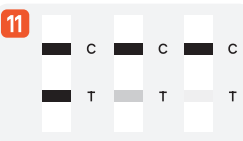

Positiv

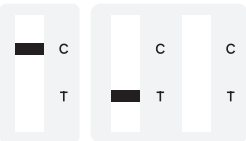

Negativ

Ungültig